



# danumed® Extensión para botón de gastrostomía

La seguridad se une a la comodidad

Material duradero del conector TRITAN™ ✓

Tubo de poliuretano resistente torceduras ✓

Cadena de suministro fiable ✓

Fabricante alemán ✓

Innovador anillo giratorio ENSwivel® ✓



Conectores de botón de alta gama, rectos y acodados ✓

Larga duración de uso hasta 14 días ✓

 Diseño optimizado del producto




• Sin látex • Sin PVC • Sin DEHP • Sin BPA

# danumed® Extensión para botón de gastrostomía

El danumed® Extensión para botón de gastrostomía está diseñado para la administración de nutrición enteral, medicación líquida y descompresión en conexión con un botón de gastrostomía.

Sus características innovadoras garantizan un buen caudal y simplifican el manejo para el usuario.

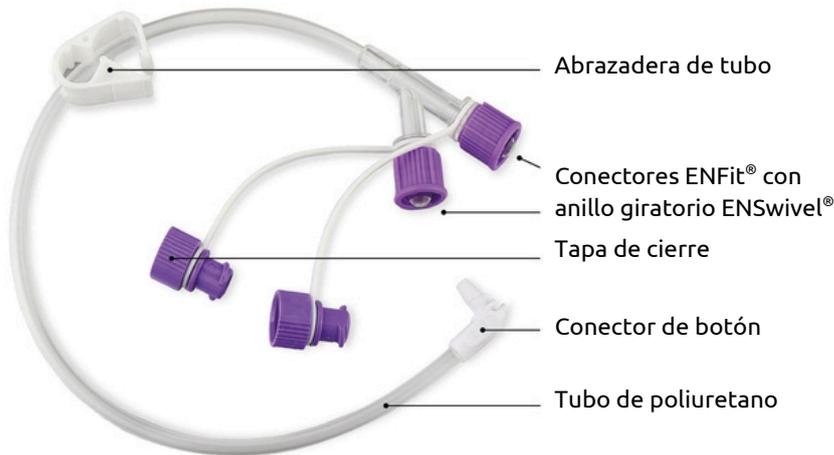

Los materiales de alta calidad permiten hasta 14 días de uso:

## Material del conector TRITAN™


- extremadamente resistente a fármacos y soluciones agresivas
- resistente a la rotura, puede evitar grietas por tensión

## Material del tubo de poliuretano

- resistente al acodamiento
- biocompatible, sin sustancias nocivas
- se mantiene blando (SIN plastificantes)


## Innovador conector giratorio ENSwivel®

- Para una mayor comodidad del paciente y un fácil manejo por parte del usuario.
- Conexión segura y estanca con sólo «girar dos dedos». Sencillo, rápido y cómodo.
- Se evita la torsión de los tubos, ya que sólo se gira el anillo giratorio ENSwivel® y NO todo el sistema.
- Calza con todos los conectores ENFit®.

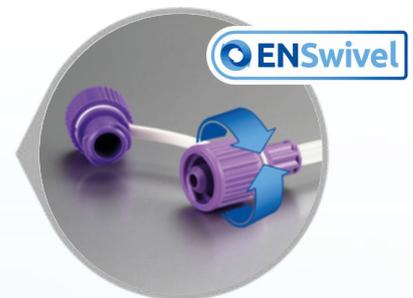

## Conector de botón de alta gama

- Perfil interior redondeado para un flujo sin obstáculos.
- Conexión fácil, segura y hermética al botón.
- Se adapta a todos los botones de gastrostomía habituales.

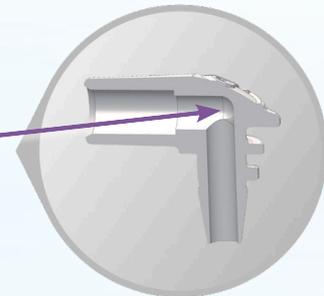

## Numerosas versiones y longitudes

- Versiones disponibles del conector ENFit®: ENFit® simple, ENFit® en Y, ENFit® Bolus.
- Disponible en diferentes longitudes: 5 cm, 30 cm y 60 cm.






## Versiones del producto

### Bolus Nutrición con jeringa

**Bolus ENFit®**

ENSwivel®

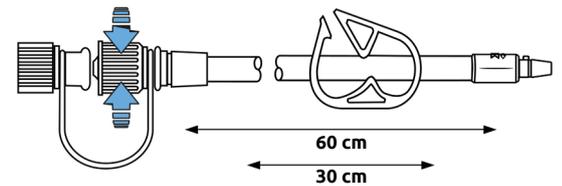


### Nutrición continua

con bomba o juego de gravedad


**ENFit®**

ENSwivel®

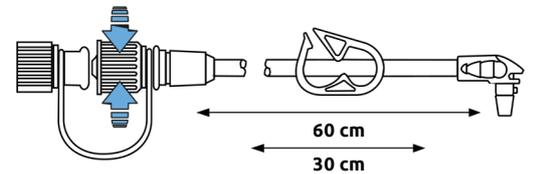

**Y-ENFit®**

ENSwivel®

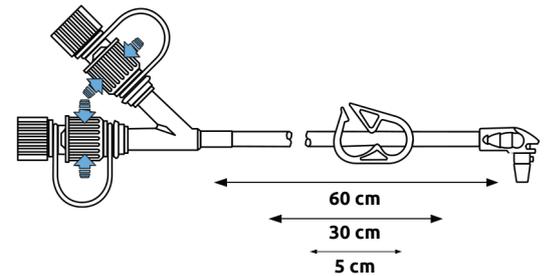

### danumed® Extensión para botón de gastrostomía con conector de botón en ángulo

REF	Descripción	Longitud	Conector de alimentación
DA 1010 3011	Juego de extensión <b>no estéril</b> , 30 cm, ENFit®, ENSwivel®	30 cm	ENFit®
DA 1010 6011	Juego de extensión <b>no estéril</b> , 60 cm, ENFit®, ENSwivel®	60 cm	ENFit®
DA 1010 3021	Juego de extensión <b>no estéril</b> , 30 cm, Y-ENFit®, ENSwivel®	30 cm	Y-ENFit®
DA 1010 6021	Juego de extensión <b>no estéril</b> , 60 cm, Y-ENFit®, ENSwivel®	60 cm	Y-ENFit®
DA 1011 3011	Juego de extensión <b>estéril</b> , 30 cm, ENFit®, ENSwivel®	30 cm	ENFit®
DA 1011 6011	Juego de extensión <b>estéril</b> , 60 cm, ENFit®, ENSwivel®	60 cm	ENFit®
DA 1011 0521	Juego de extensión <b>estéril</b> , 5 cm, Y-ENFit®, ENSwivel®	5 cm	Y-ENFit®
DA 1011 3021	Juego de extensión <b>estéril</b> , 30 cm, Y-ENFit®, ENSwivel®	30 cm	Y-ENFit®
DA 1011 6021	Juego de extensión <b>estéril</b> , 60 cm, Y-ENFit®, ENSwivel®	60 cm	Y-ENFit®

Suministrado con conector de botón en ángulo recto y tubo de calibre estándar. Empaquetado individualmente. 10 piezas en una caja, 10 cajas en una caja de envío.



### danumed® Extensión para botón de gastrostomía con conector de botón recto

REF	Descripción	Longitud	Conector de alimentación
DA 1010 3032	Juego de extensión <b>no estéril</b> , 30 cm, ENFit® Bolus, ENSwivel®	30 cm	ENFit® Bolus
DA 1010 6032	Juego de extensión <b>no estéril</b> , 60 cm, ENFit® Bolus, ENSwivel®	60 cm	ENFit® Bolus
DA 1011 3032	Juego de extensión <b>estéril</b> , 30 cm, ENFit® Bolus, ENSwivel®	30 cm	ENFit® Bolus
DA 1011 6032	Juego de extensión <b>estéril</b> , 60 cm, ENFit® Bolus, ENSwivel®	60 cm	ENFit® Bolus

Entregado con conector de botón recto y tubo de diámetro interior ancho. Embalaje individual. 10 piezas en una caja, 10 cajas en una caja de envío. Los juegos de extensión de bolo ENFit® están disponibles bajo pedido con conector de embudo en lugar de conector ENFit®.



## **danumed Medizintechnik GmbH**

*Las soluciones individuales son nuestra norma.*

Somos una empresa familiar, innovadora y alemana de tecnología médica con altos estándares de calidad, muchos años de experiencia en nutrición enteral y con una clara orientación al cliente.

Las peticiones individuales de los clientes se satisfacen con flexibilidad y fiabilidad. Personal, competente y colaborativamente.

danumed Medizintechnik GmbH • Stadthof 18 • 93059 Regensburg • Alemania  
Tel + 49 (0) 941/ 890 588-80 • Fax + 49 (0) 941/ 890 588-81

info@danumed.com • [www.danumed.com](http://www.danumed.com)